



ARISTORM PRO 10

by VeneSpa



Equipo estético multifuncional de uso profesional incorporado con onda ultracavitadora, radiofrecuencia, vacumterapia, microcorriente, cromoterapia, martillo frío/caliente, ultrasonido, BIO estimulación y Lipoláser.

TABLA DE CONTENIDOS

03	Introducción
04	Ultracavitación
05	Radiofrecuencia Corporal
06	Vacumterapia + Radiofrecuencia
07	Radiofrecuencia Facial y función BLO
08	Cromoterapia + Microcorriente
09	Ultrasonidos
10	Martillo Frío/Caliente
11	Lipolaser
12	Contenido y Dimensiones
13	Contáctanos

"Estamos comprometidos con la belleza sin riesgos"

INTRODUCCION

Los tratamientos estéticos basados en tecnología no invasiva son cada vez más populares en el mundo de la belleza. Y nuestro modelo Aristorm Pro 10, está diseñado para ayudar eficazmente a reafirmar la piel, moldear el cuerpo y combatir el envejecimiento de forma segura y sin riesgos para la salud. Por lo tanto, este equipo es un reemplazo eficaz de los tratamientos invasivos de cuidado facial y corporal.



Resuelve condiciones estéticas frecuentes de la piel y el cuerpo. Este equipo no requiere inyección, ni medicación, por lo que no tiene efectos secundarios. Se utiliza externamente durante todo el proceso y ofrece efectos observables en pocas sesiones.

Nuestra línea de equipos Aristorm Pro incorpora la última tecnología en ondas de Ultracavitación y Radiofrecuencia Inteligente, brindando mejores resultados en comparación a versiones anteriores. Además, están confeccionados con materiales ultra resistentes que garantizan larga durabilidad mientras ofrecen máximo desempeño. Es un equipo de belleza profesional, que necesita ser manejado por profesionales con la formación adecuada.



ULTRACAVITACION

ULTRACAVITACION 2.5



El efecto de la Ultracavitación de 40 Khz versión 2.5, apunta únicamente a los tejidos adiposos de baja densidad debido a su frecuencia específica y protege tejidos de alta densidad como nervios y tejidos vasculares.

Frecuencia: 40 Khz
Potencia: 30 W



La onda ultrasónica es usada para provocar un impacto en las células adiposas y generar fricción una vez que las ondas entran al cuerpo, lo cual calienta efectivamente el adiposito, consumiendo así el agua en su interior y contrayéndolo al máximo. Luego, las células adiposas implosionan para provocar el efecto de eliminación de grasa.

Decenas de miles de pequeñas burbujas, llamadas burbujas de ultracavitación son producidas por la vibración de líquidos. Cuando las burbujas implosionan, se genera presión entre decenas a centenares de MPa y provoca ruido ultrasónico que puede ser percibido por el paciente.



RADIOFRECUENCIA CORPORAL



Frecuencia: 1Mhz
Potencia: 30 W

La Radiofrecuencia calienta las capas más profundas de la piel, estimula el colágeno para que se regenere y reorganice en la dermis y promueve la circulación sanguínea, lo que puede lograr resultados de reafirmación y antienvjecimiento.

Su onda electromagnética puede penetrar directamente en la piel y utiliza la resistencia formada por ésta para producir energía, lo que provoca el aumento de la temperatura. Ésta función tiene dos efectos terapéuticos: reafirma la piel y elimina grasa localizada.

Radiofrecuencia Inteligente 3D

La Radiofrecuencia de última generación de nuestra línea Aristorm Pro, emite energía al contacto con la piel, ajustando de forma automática la intensidad según la temperatura corporal del paciente. Esta novedosa funcionalidad hace un uso más eficiente de la energía, logrando mejores resultados y alargando la vida útil del equipo y sus componentes.

Parámetros

Frecuencia de la Radiofrecuencia:
1 Mhz

Potencia: 50 W

Vacío: <-80kPa

Presión: >250kPa

Flujo de aire: >10L/minuto

Nivel de ruido: <70db (30 cm de distancia)



VACUM + RF

La combinación perfecta de vacumterapia y radiofrecuencia ayuda a eliminar grasa y, al mismo tiempo, reafirmar la piel, aumentar la elasticidad, promover el metabolismo y, en última instancia, fortalecer la constitución corporal.

Las placas de Radiofrecuencia de diseño único integran el cabezal de vacuum como un todo, en el que la Radiofrecuencia y el vacío pueden existir de forma independiente y también complementaria. En comparación con la radiofrecuencia ordinaria, esta combinación puede moldear el cuerpo de una manera más efectiva, más rápida y uniforme.

RADIOFRECUENCIA

FACIAL Y BIO



La Radiofrecuencia facial puede emitir ondas de radio con una frecuencia de un millón de veces por segundo, las cuales penetran la capa de la epidermis directamente hacia la dermis, calentando las células y estimulando el crecimiento de fibras de colágeno más compactas y elásticas.

El efecto de la onda electromagnética puede reducir arrugas, aclarar manchas, otorgar luminosidad y elevar el contorno facial.

Frecuencia: 3 Mhz
Potencia: 30 W

BIO estimulación

Emite corrientes bioeléctricas que simulan al cuerpo humano, a través de las células musculares. Aumenta la permeabilidad de las células, entre un 30 % y un 40 % y mejora el contenido de oxígeno en la sangre . Las corrientes estimulan el trifosfato de adenosina (ATP) intracelular, restablecen el funcionamiento normal de las células y suministran energía al músculo

El aumento del nivel de síntesis de colágeno en un 73% puede disminuir las arrugas y aumentar la suavidad, elasticidad y brillo de la piel.



CROMOTERAPIA + MICROCORRIENTE

Longitud De Onda

Rojo	635 NM
Azul	462 NM
Verde	527 NM
Púrpura	600 NM
Amarillo	590 NM
Blanco	670 NM
Turquesa	610 NM



La terapia de fotones LED utiliza el principio de la fotodinámica para activar las células profundas y estimular el metabolismo de la piel. Aumenta la descomposición del trifosfato de adenosina (ATP), una fuente de energía celular, y aumenta el contenido de glucógeno y proteínas. Después de que la piel absorbe la luz, la energía se transforma en energía intracelular, que expande y fortalece los microvasos y produce una reacción fotoquímica-enzimática que promueve la síntesis celular.

Además, promueve la formación de nuevo colágeno para aumentar la elasticidad de la piel. Desempeña un papel importante en el cuidado facial, como la reparación de la piel envejecida y el acné, la decoloración de las manchas y el alivio de las quemaduras solares.



PALETA ULTRASONICA

Aplica el principio de vibración ultrasónica de alta frecuencia. La energía producida por la vibración mecánica de más de 28.000 veces por segundo tiene un efecto de permeabilidad notable en la piel.

Con el uso de productos suavizadores o exfoliantes, las ondas pueden reparar el estrato córneo deteriorado, abrir los poros y eliminar profundamente los desechos y suciedad, dejando la piel brillante, limpia, suave y tersa.

Frecuencia: 3 Mhz

ULTRASONIDO

Su frecuencia de 3 MHz por segundo penetra poderosamente de 4 a 6 milímetros el tejido subcutáneo, implosionando la grasa de los poros y cambiando el volumen de las células para mejorar la circulación sanguínea

Por lo tanto, estimula la capacidad de regeneración de las células y aumenta el brillo y elasticidad de la piel. Además, el efecto de tibieza generado por la vibración de alta frecuencia puede aumentar la permeabilidad, lo que facilita la absorción de productos de cuidado facial.



MARTILLO FRÍO/ CALIENTE

Parámetros

Modo frío: 0 a -5 °C

Modo caliente: hasta 45 °C



Función Frío

El efecto frío puede contraer los vasos sanguíneos y por ende los poros, además reduce la tasa metabólica y la sensibilidad para tener un efecto calmante y desinflamatorio.

Asimismo, favorece la desintoxicación de la sangre venosa en términos de sustancias nocivas y tiene un efecto significativo en la reducción y eliminación de manchas.

Función Caliente

La temperatura de 40 °C provoca el relajamiento de los músculos, mantiene el equilibrio del sistema nervioso vegetativo y alivia el dolor. Además, puede promover la circulación sanguínea, aumentar el contenido de oxígeno en la sangre, expandir los poros y extender los vasos sanguíneos para que la piel absorba los nutrientes rápidamente.

LIPOLASER

Parámetros

Longitud de Onda: 635nm-650nm

Potencia de cada luz: 5mw

Potencia de cada panel Grande:
48mw

Potencia de cada panel Pequeño:
5mw

Potencia de salida: 100 VA




Utiliza un láser LED de 635nm - 650nm para calentar las células grasas en la zona objetivo y finalmente descomponerlas. En un período de tiempo muy corto, la acumulación de grasa es absorbida y excretada por el proceso metabólico natural del cuerpo. La tecnología láser puede generar calor en el área de tratamiento para estimular la producción de colágeno, brindando así los efectos de suavizar y tensar la piel, además de dar forma al cuerpo.

El láser de baja energía (estimulación biológica) estimula las células e induce una serie de reacciones fisiológicas mediante la liberación de energía, incluida la promoción de la circulación sanguínea local, la regulación de la función celular, la mejora de la función inmunológica y la promoción del metabolismo celular

CONTENIDO Y

DIMENSIONES

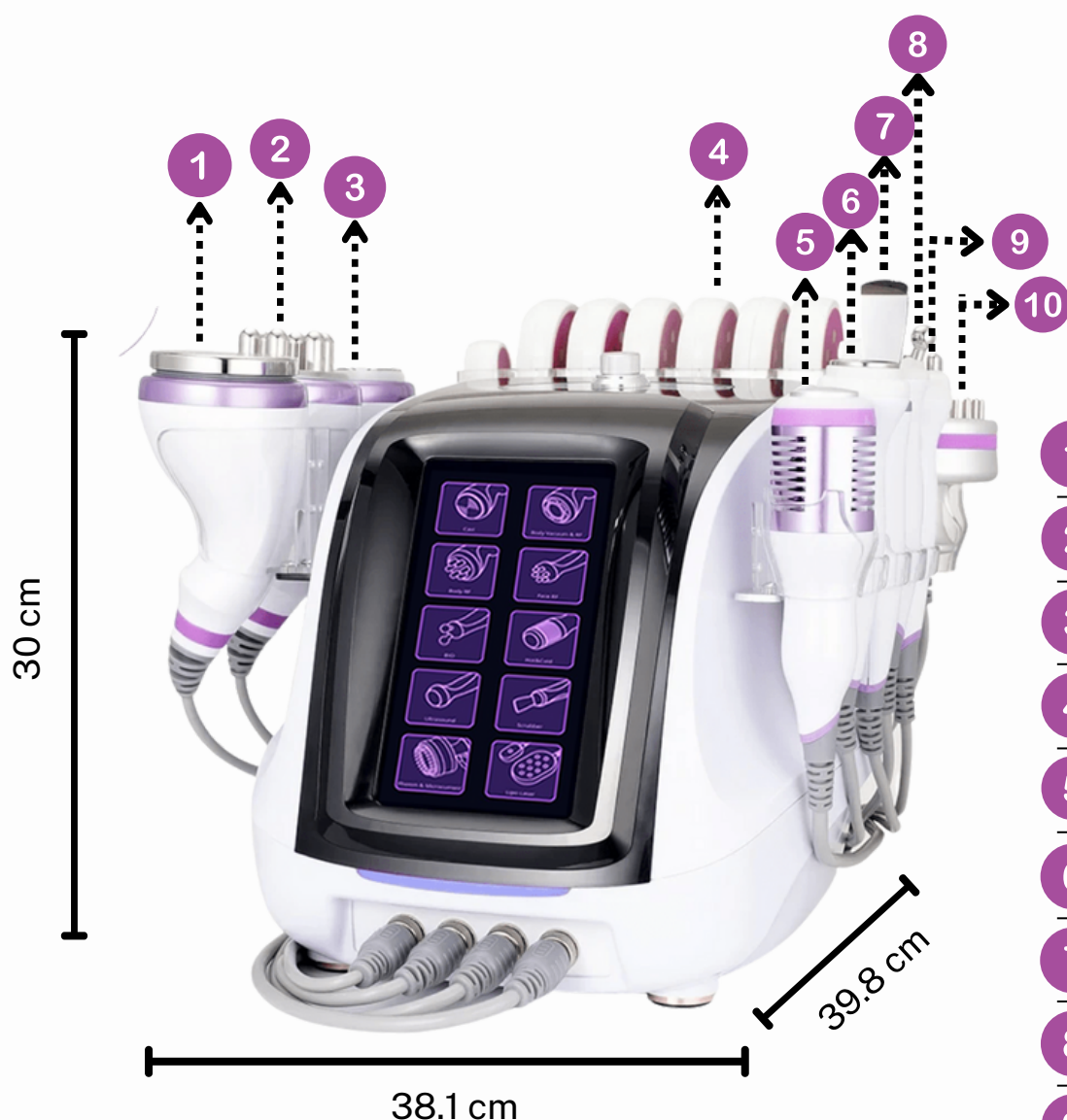

Voltaje: 110V-240V

Potencia: 190W

Funciones

- 1 Ultracavitación
- 2 Radiofrecuencia Corporal
- 3 Vacumterapia + Radiofrecuencia
- 4 Lipolaser (6 Pads G/ 2 Pads P)
- 5 Martillo Frío / Caliente
- 6 Ultrasonido Facial
- 7 Paleta Ultrasónica
- 8 BIO estimulación
- 9 Radiofrecuencia Facial
- 10 Cromoterapia + Microcorriente

12



Bandas Elásticas



1x Cable de Corriente

CONTACTANOS



+58 (414) 2087903



@Venespaa



Venespa



venespavenezuela@gmail.com



Venezuela (Caracas), Colombia
(Bogotá), Estados Unidos (Miami, FL)